


Spinsolve アドバンストオートサンプラー

すべてのSpinsolveモデルにフィットし完全自動温度制御サンプルチェンジャーによる
ハイスループットサンプル測定を可能にします！

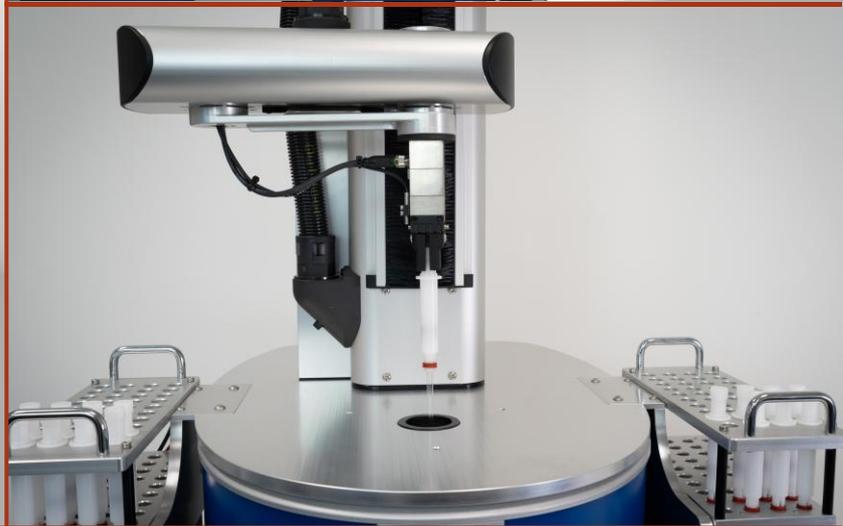

技術的特長と仕様


- 容量：サンプルラック2台（各40スロット） - 計80スロット
- サンプルチューブ：標準外径5mm、長さ7インチ
NMRチューブ
- サンプル温度制御：周囲温度～60℃、内蔵電気ヒーター
- 操作ソフトウェア：Spinsolveソフトウェアアドオン（永久ライセンス）、簡単なプロトコルキューイングと処理
- すべてのSpinsolveモデル、フローセルセットアップ、および手動ローディングに対応
- 安全機能：過負荷または障害物検知時の自動停止機能付き
統合負荷測定
- Spinsolve を含む寸法：約38インチ×28インチ
×22インチ（高さ×幅×奥行き）
- 入力電圧：100ACV
- 分光計のコンピューターへのUSB接続

Spinsolve

直感的なソフトウェアインターフェースがSpinsolveソフトウェアに完全に統合されています

サンプルスロット

- 各サンプルのプロトコルはワンクリックでキューに追加されます
- キューの実行中に新しいサンプルを追加/削除できます
- 事前に保存されたリストから、あらかじめ設定された一連の実験を読み込むことができます

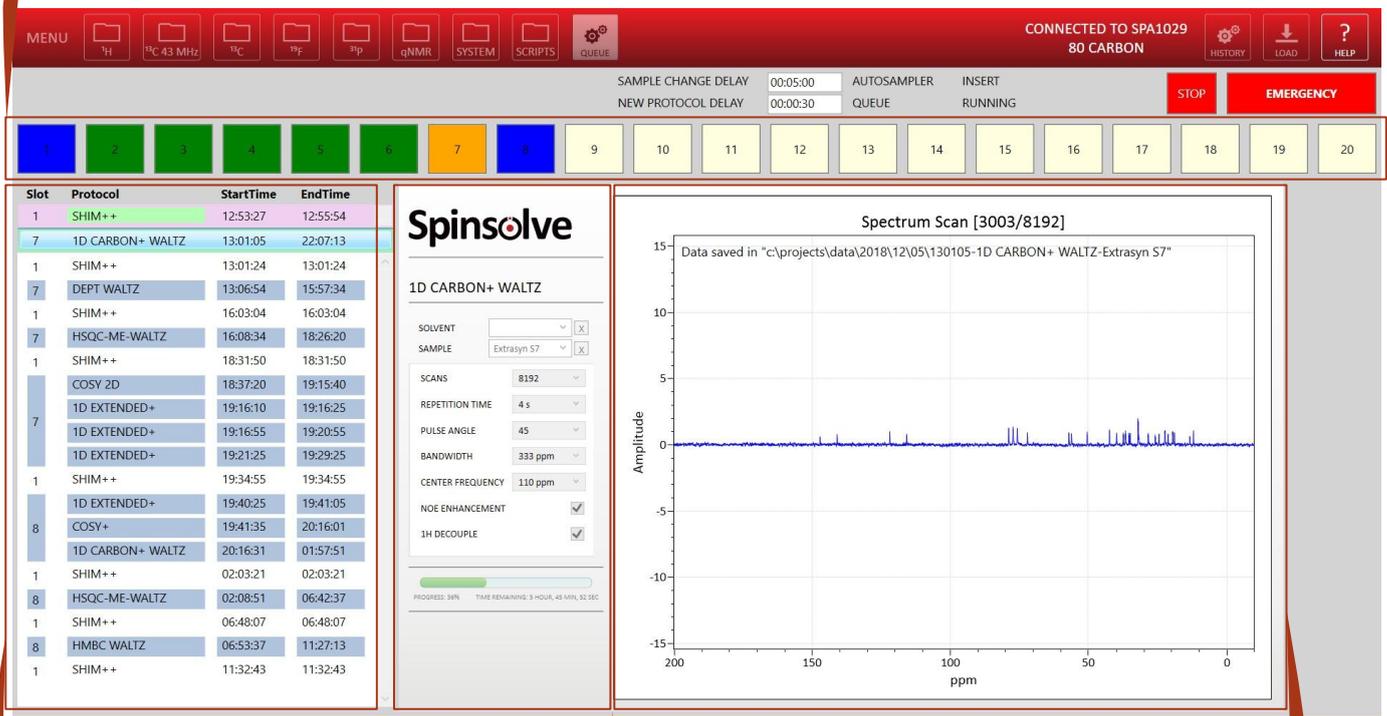

各サンプルのプロトコルキュー

- キュー内の完了済みおよび今後のプロトコルの履歴を簡単に確認可能
- サンプルキューは、サンプルの測定順序を変更するためにいつでも修正できます
- プロトコルの順序は、ドラッグして上下に移動させることで簡単に変更できます

データウィンドウ

測定中および完了した実験のデータが表示されます

実験パラメータ

各実験の個別パラメータはプロトコル読み込み時に定義され、データ取得中に表示される



輸入販売元

株式会社 朝日ラボ交易

TEL: 078-335-8613

FAX: 078-335-8614

info@asahilab.co.jp

https://asahilab.co.jp/

販売